

CELLULESS - Uputstvo za upotrebu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja proizvoda. Molimo Vas da sačuvate ovo uputstvo radi daljeg korišćenja.

Celluless – novi sistem za masažu.

Ovo je najnoviji bežični sistem za masažu. Jednostavno punite bateriju 8 sati i uživajte u preko 30 minuta masaže. Ovaj proizvod predstavlja najbolji aktivni sistem za masažu.

CELLULESS sistem za masažu koristi naprednu i jedinstvenu tehnologiju koja nije dostupna čak ni u profesionalnim salonima za ulepšavanje.

CELLULESS je dizajniran za upotrebu u kućnim uslovima.

PRILOŽENO:

- 1 Celluless aparat za masažu
- 1 vakuumska „čša“ za masažu
- 1 AC/DC punjač

Opis Celluless-a.

Celluless je veoma prijatan masažer.

Nazivi delova

- A. Telo aparata. CELLULESS
- B. Prekidač.
- C. Prekidač regulacije operacija.
- D. Dugme za forsirano zaustavljanje masaže.
- E. Mlaznica za masažu.
- F. Konektor za šolju za masažu.
- G. Lampica za punjač.
- H. „čša“ za masažu.
- I. Konektor za punjenje.
- J. Punjač.



Sigurnosna uputstva

Pre upotrebe ovog proizvoda, molimo Vas da pročitate ova bezbedonosna uputstva. Ovde navedena sigurnosna uputstva će Vam pomoći da ovaj proizvod koristite bezbedno i pravilno, i da na taj način sprečite da Vi ili neko iz Vaše okoline bude povređen.

Ova uputstva su klasifikovana u sledeće kategorije:

Punjenje baterije:

Ako prvi put koristite ovaj proizvod, molimo Vas da ispraznite bateriju pre punjenja.

1. Prvo uključite punjač u utičnicu i onda spojite konektor sa ovim proizvodom.
2. Kad se puni, molimo Vas da proverite da li se prekidač (B) nalazi u OFF položaju. Uređaj se puni kad je lampica (G) uključena.
3. **Vreme punjenja baterija ne sme da pređe 8 sati.**
4. Ako ovaj proizvod nije korišćen više od nedelju dana, molimo Vas da prvo proverite da li je punjač u dobrom stanju pre punjenja baterije.

Specifikacija punjača:

Vreme punjenja: 8 sati

Napon: 110V/ 220V

Punjač: DC 3V; 800 mA

KAKO DA KORISTITE CELLULESS


1. Molimo Vas da operete i osušite deo koji želite da masirate: butine, stomak, ruke, zadnjicu ili kukove. Ovo će pospešiti Vaš metabolizam i postići ćete najbolje rezultate.
2. Slušajte muziku ili se odmarajte da biste se potpuno opustili.
3. Nastavite da koristite Celluless u kružnim pokretima na području butina, stomaka, ruku, zadnjice ili kukova.
4. Onda koristite CELLULESS za svaku oblast i koristite ga kako sledi:



Na butinama: Masirajte u smeru gore-dole u kružnim pokretima da biste stimulisali površinsku mikrocirkulaciju.

Na stomaku: Masirajte u smeru kazaljke na satu u širokim kružnim pokretima.

Na zadnjici ili na kukovima: Masirajte sa svake strane karlice, koristeći kružne pokrete i idući na gore prema struku.

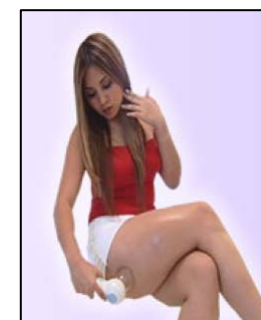

Na rukama: Masirajte od laktova prema ramenima, posebno na unutrašnjoj strani ruke.

5. Kad završite sa korišćenjem CELLULESS-a, molimo Vas da očistite čašu za masažu vodom i da je odložite kad se osuši.



Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja proizvoda. Molimo Vas da sačuvate ovo uputstvo radi daljeg korišćenja.

Studio Moderna d.o.o.
Bul. Vojvode Stepe 30
21000 Novi Sad
021/4892619 (9-15h)

Sertifikat br 0708091800



Sertifikat br 0908016800



Izdato od: AD za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet Niš“